



OFFERTA N° 02/09/P del 05 Maggio 2009

2) PROTOCOLLO SCONGELAMENTO SEME SUINO

PROTOCOLLO OPERATIVO

Semplice, Rigoroso , Efficace

1) Portare il mestruo a 37° C




2) Estrarre 10 pallettes dal bidone





OFFERTA N° 02/09/P del 05 Maggio 2009


3) Immergere le pailettes a 42 °C per 20 secondi

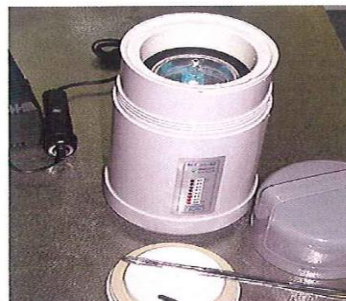

4) Estrarle ed asciugarle




5) Tagliare le pailettes a livello della saldatura

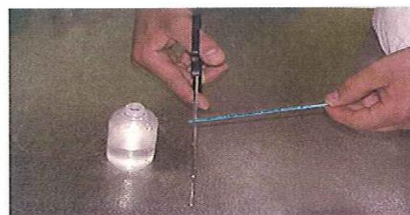



OFFERTA N° 02/09/P del 05 Maggio 2009

6) Inserire ogni paillettes nel flacone e tagliarla sotto lo stantuffo

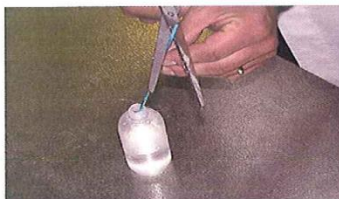

7) Chiudere il flacone e agitare dolcemente
la dose è pronta all'uso

